

Pure binax.

Полностью функциональный, небольшой и по-настоящему бинауральный.




Технологические уровни

7bx

5bx


3bx

Pure binax
Действительный
размер в см

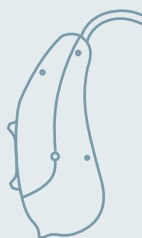

Благодаря превосходному балансу технологии binax и изящному дизайну, Pure binax готов угодить даже самому требовательному пациенту. Маленький, обладающий рейтингом IP-67, он предлагает все преимущества бинаурального аппарата с выносным ресивером.

Доступные цвета:

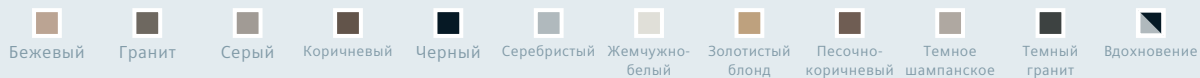

Плюс ко всему, в комбинации с многофункциональным easyTek и easyTek App Pure binax понравится даже самым технически подкованным пользователям.

Обзор Pure binax.

1 e2e wireless 3.0

Третье поколение беспроводной системы передачи данных - то, что обеспечивает передовые бинауральные возможности binax.

2 Направленные микрофоны

Оптимизированное расположение и ориентация обеспечивают наилучшее бинауральное звучание.

3 Органы управления

Органы управления могут быть запрограммированы и/или заменены на кулисный переключатель или гладкое покрытие.

4 Батарейный отсек

Для стандартной или перезаряжаемой батарейки 312 с функцией вкл/выкл

5 Беспроводная связь



Простой аудиостриминг и дистанционное управление с помощью easyTek и easyTek App.

6 Тиннитус-маскер

Два программируемых режима: только тиннитус терапия или смешанный режим.

7 Контактная группа

eCharger заряжает и высушивает Pure binax в течение ночи.

8 Дистанционное управление



Программы Pure binax, громкость, низкие и высокие частоты могут быть с легкостью изменены через touchControl App.

➤ Акустическое соединение

miniReceiver 2.0 доступен в четырех размерах и силовых уровнях. Вкладыши доступны в размерах от 6 мм до 12 мм




Вкладыши




miniReceiver 2.0

miniReceiver 2.0 S

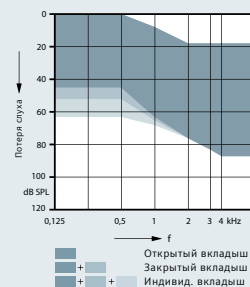


S 45/108 дБ

miniReceiver 2.0 M

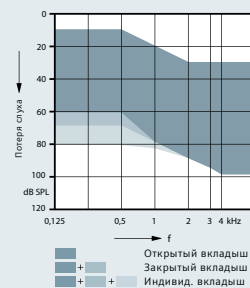


M 60/119 дБ

miniReceiver 2.0 P

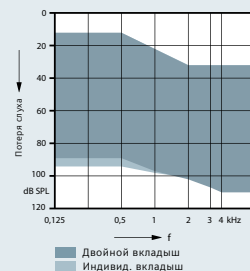

P 70/124 дБ

miniReceiver 2.0 HP

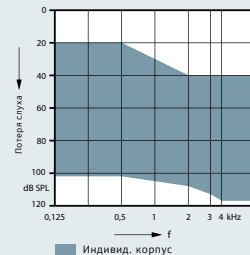

HP 75/130 дБ

Функции binax		Технологические уровни		
		7bx	5bx	3bx
Информация	Информация			
Обработка сигнала	Каналы	48	32	24
Усиление/ВУЗД	Ручные регуляторы в Connexx	20	16	12
Программы	Кол-во максимально доступных	6	6	6
touchControl App	Только для устройств iOS и Android	●	●	●
binaxFocus				
Направленность	Разрешение по каналам	48	32	24
Бинауральная направленность OneMic ⁷	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●●●●●	–	–
Узкая направленность ^{6,8}	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●●●●●	●●●●○	●●●●○
Направленные микрофоны ⁸		●●●●●	●●●●○	●●●●○
Пространственный SpeechFocus ^{6,8}	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●●●●●	–	–
SpeechFocus		●●●●○	●●●●○	–
TruEar™	Для заушных и RIC слуховых аппаратов	●●●●●	●●●●○	●●●●○
Частотная компрессия		●	●	●
binaxSound				
бинауральный eWindScreen ^{6,8}	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●	–	–
eWindScreen	Кол-во шагов настройки	3	3	1
Расширенная полоса пропускания		●	–	–
Адаптивная регулировка стримнга ⁹	При стриминге, easyTek, e2e wireless 3.0	●	–	–
SoundBrilliance™ ⁶	При стриминге, easyTek, e2e wireless 3.0	●	●	–
Подавление обратной связи		●	●	●
Шумоподавление	Разрешение по каналам	48	32	24
	Объединенные шаги настройки	5	5	3
Направленное выделение речи ⁸	Индивидуальные шаги настройки	3	1	–
SoundSmoothing™	Индивидуальные шаги настройки	3	3	1
Менеджер Речи и Шума	Индивидуальные шаги настройки	7	5	3
binaxGuide				
Sound equalizer	Количество классов	6	3	–
Data logging		●	●	●
Learning	Количество классов	6	3	1
Автоматическая Акклиматизация		●	●	●
binax fit		●	●	●
Пространственный конфигуратор ^{6,8}	Req. bilateral fitting & e2e wireless 3.0	●	●	–
Диапазон	easyTek и easyTek App или кулис. переключ.	●	●	–
Направленность	easyTek и easyTek App	●	●	–
Тиннитус-маскер				
Статич. терапевтические сигналы	Ручные регуляторы в Connexx	20	16	12
Сигналы "Океанские Волны"		●	●	●

⁶ Кроме Ace binax.

⁷ Только для СА с одним микрофоном каждый.

⁸ Только для СА с двумя микрофонами каждый.